



KYARA®

SCALDALETTO

MANUALE DI ISTRUZIONI



INDICE

1. CODICI.....	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	PAG.3
4. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.5
5. DESCRIZIONE GENERALE.....	PAG.6
6. MODALITÀ D'USO	PAG.7
6.1 Come disporre lo scaldaletto.....	pag. 7
6.2 Funzione di autospegnimento.....	pag. 7
6.3 Spegnimento	pag. 7
7. PULIZIA E MANUTENZIONE.....	PAG.8
7.1 Conservazione	pag. 8
8. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI	PAG.9
9. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.9
10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	PAG.10
11. GARANZIA	PAG.10
11.1 Clausole esonerative.....	pag. 11

1. CODICI

LTK780 SCALDALETTO - SINGOLO 150x80 cm

LTK785 SCALDALETTO - DOPPIO 160x140 cm

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto lo scaldaletto della linea Kyara by Moretti. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni

3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità del prodotto e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al rivenditore locale. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.
- Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come scaldaletto per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Durante i primi utilizzi, può rilasciare cattivi odori a causa di materiali sintetici.
- Le prove di calore dello scaldaletto all'aria aperta, per esempio con le mani, non si possono considerare valide, perchè soggette a una valutazione erranea del calore.
- L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- In particolare non utilizzare l'apparecchio con persone inferme, infanti o persone insensibili al calore. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, se i dispositivi di comando non sono stati prerogolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.

-  **AVVERTENZA - NON** adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare l'apparecchio a causa della loro incapacità a reagire in caso di surriscaldamento.
- **NON** azionare il comando di temperatura con mani bagnate.
- **NON** tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- **NON** immergere il cavo di alimentazione e il telecomando.
- Scollegare il dispositivo dalle rete elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo.
- Per scollegare il dispositivo non tirare il cavo, staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.
- **NON** posizionare il telecomando dello scaldaletto sotto il cuscino o tra le lenzuola o le coperte quando il dispositivo è collegato.
-  **NON** utilizzare l'apparecchio piegato.
- Quando si ripone il prodotto lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.
- **NON** lasciare indumenti all'interno del prodotto piegato.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.
- Il dispositivo **NON** può essere utilizzato da portatori di pacemaker. Il dispositivo può essere utilizzato per preriscaldare il letto, ma deve essere spento e disconnesso dall'alimentazione prima di coricarsi.
- Questo apparecchio non è idoneo per uso medico negli ospedali.
- **NON** utilizzare se bagnato o in ambienti con alto livello di umidità (es.bagno)
- **NON** usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.
- **NON** addormentarsi mai con l'apparecchio in funzione. Spegnerlo sempre prima di addormentarsi.
- Se si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, l'interruttore dovrà essere collocato nella posizione 1-2 (calore minimo).
- **NON** utilizzare il dispositivo su parti del corpo gonfie o dolenti.
- Spegnerlo immediatamente il dispositivo se si avverte dolore durante l'uso.
- **NON** utilizzare il dispositivo se nell'aria sono presenti gas altamente infiammabili.
- **NON** utilizzare mai il dispositivo in prossimità di una fonte di gas.
- **NON** collocare sul prodotto materiali combustibili o materiali che si deteriorano facilmente a causa del calore (ad esempio cartone, plastica, carta, candele).
- **NON** esporre mai l'apparecchio ad altre fonti di calore (come fornelli o forni), a temperature sotto zero, alla luce solare diretta, all'umidità.
-  **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**
- Un'applicazione prolungata con regolazione elevata può causare bruciature alla pelle.
- **NON** utilizzare il dispositivo con mani e/o piedi bagnati o umidi.

- **NON** usare il dispositivo in bagno, lavanderie; posizionarlo sempre in modo da evitare la caduta in acqua.
- Evitare l'utilizzo di prolunghes; se non idoneo il cavo della prolunga potrebbe surriscaldarsi.
- **NON** utilizzare su letti regolabili: in caso contrario verificare prima dell'utilizzo che la coperta ed il cavo non possano rimanere intrappolati o bloccati.
- **NON** rimboccare.


AVVERTENZA!

In caso di uso improprio, sussiste il rischio di possibili lesioni.

4. SIMBOLOGIA UTILIZZATA


Codice prodotto



Mese e anno produzione



Marchio CE



Manuale istruzioni



Smaltimento



Classe di protezione II



Non usare la candeggina



Lavare a mano ad una temperatura non superiore ai 30°



Non lavare a secco




Non asciugare in asciugatrice



Non stirare

5. DESCRIZIONE GENERALE

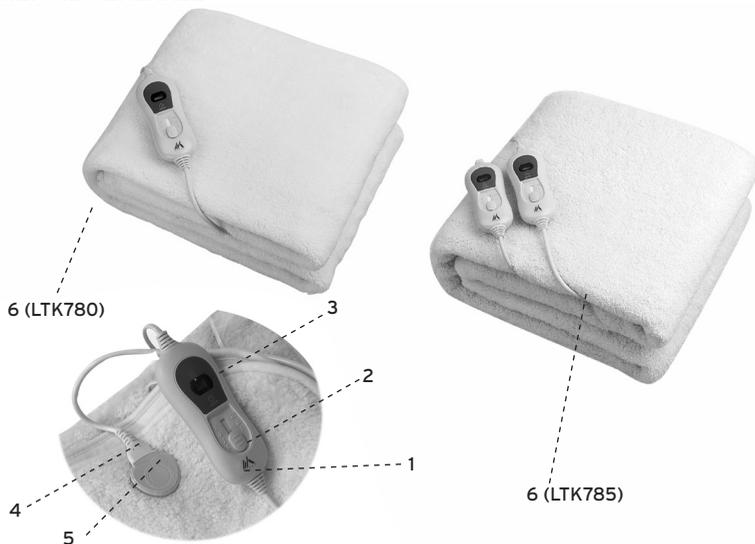

(Immagine a scopo illustrativo)

COMPONENTI PRINCIPALI

1. Telecomando
2. Selettore temperatura
3. Display
4. Connettore
5. Base del connettore
6. Scaldaletto

6. MODALITÀ D'USO


Lo scaldaletto deve essere posizionato tra il materasso e il primo lenzuolo e non sopra al letto o a persone.



ATTENZIONE!

Lo scaldaletto è utilizzabile esclusivamente con il comando fornito in dotazione. Il modello relativo è specificato sull'etichetta.

6.1 Come disporre lo scaldaletto

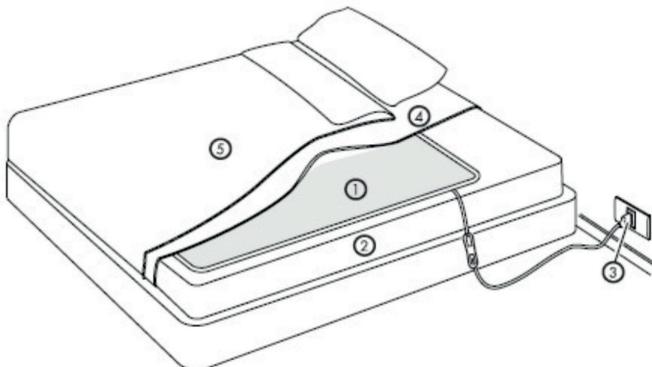

(Immagine a scopo illustrativo)

1. Posizionare lo scaldaletto direttamente sul materasso, con la spina rivolta verso il materasso. Assicurarsi che sia ben disteso e fermarlo con le cinghie in dotazione. **NON** posizionare lo scaldaletto sotto il cuscino.
2. Posizionare il primo lenzuolo sopra lo scaldaletto e preparare il letto come di solito.
3. Inserire la presa del comando nella spina per collegare il comando di regolazione della temperatura allo scaldaletto. Per il modello matrimoniale è necessario ripetere l'operazione anche per la seconda presa. Staccare la presa dallo scaldaletto premendo le leve ai lati della spina. Inserire la spina del cavo del comando nella presa di corrente. Selezionare la temperatura desiderata ruotando la manopola di regolazione. Selezionare la temperatura elevata di pre-riscaldamento per ottenere un riscaldamento rapido. Selezionare le temperature da 1 a 4 per un riscaldamento prolungato.
 - Livello 0 = spento
 - Livello 1 = Temperatura minima
 - Livello 2 = Temperatura media
 - Livello 3 = Temperatura massima

6.2 Funzione di autospegnimento

- Lo scaldaletto è dotato di un sistema di arresto automatico. Dopo 180 min. di funzionamento, si spegne.
- Per riaccendere l'apparecchio, posizionare l'interruttore del selettore della temperatura nella posizione "0", aspettare alcuni secondi, dopodiché selezionare di nuovo il livello di temperatura desiderato.

6.3 Spegnimento

- Spegnerlo lo scaldaletto portando il selettore della temperatura sulla posizione "0".
- Disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

7. PULIZIA E MANUTENZIONE



Non usare la candeggina



Lavare a mano ad una temperatura non superiore ai 30°



Non lavare a secco



Non asciugare in asciugatrice



Non stirare

- Col passare del tempo, il tessuto dello scaldaletto potrebbe subire un naturale ingiallimento. Questo fenomeno non compromette la sicurezza e/o le prestazioni del dispositivo stesso.
- Prima di procedere alla pulizia assicurarsi che lo scaldaletto non sia collegato alla rete elettrica e che sia freddo.
- Staccare sempre il cavo di collegamento prima di procedere alla pulizia.
- Il lavaggio in lavatrice, il lavaggio a secco o l'asciugatura a tamburo possono danneggiare il filo di riscaldamento interno a causa della forza dell'alta velocità. Lo scaldaletto può essere lavato a mano ad una temperatura non superiore ai 30°C. Per asciugare lo scaldaletto, porlo su una superficie che assorba l'umidità.
- NON comprimere o strizzare.
- Utilizzare un detergente neutro.
- NON USARE candeggina.
- NON asciugare in asciugatrice, far asciugare all'aria, non porre lo scaldaletto su termosifoni o altri sistemi riscaldanti.
- Non usare mollette sulle parti elettriche del dispositivo per evitarne il danneggiamento.
- NON stirare.
- Assicurarsi che lo scaldaletto sia completamente asciutto prima di un nuovo utilizzo.
- Durante la pulizia non usare prodotti chimici o abrasivi.
- Non immergere mai il cavo di alimentazione o il telecomando in acqua o in altri liquidi, ciò causerebbe danni irreparabili.
- NON usare lo scaldaletto fin quando non è completamente asciutto.
- STENDERE LO SCALDALETTTO
 - Si consiglia di stendere lo scaldaletto cercando di raggiungere le dimensioni originali. Il risultato migliore, lo si ottiene quando il prodotto è ancora umido, tirando le fasce laterali una per volta. Potrebbe essere necessario ripetere tale operazione più volte fin quando il prodotto non risulterà asciutto.
 - Controllare che i cavi non siano attorcigliati o piegati. Tale controllo riesce meglio se fatto in controluce.
 - In caso di problemi con i cavi, dopo aver steso lo scaldaletto o se lo scaldaletto non riprende la forma originale, contattare il rivenditore più vicino per un controllo di sicurezza.

7.1 Conservazione

- Lasciare raffreddare il prodotto prima di riporlo.
- Non mettere oggetti sopra il prodotto durante lo stoccaggio.
- Conservare lo scaldaletto sempre in un luogo asciutto e lontano da altre fonti di calore.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



ATTENZIONE!

Se il dispositivo elettrico non funziona correttamente ed è difettoso, non tentate di ripararlo da soli.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non riceve alimentazione.	Verificare se: a. il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa di collegamento; b. la spina di rete è inserita nella presa della corrente; c. la presa della spina è difettosa; d. il fusibile del vostro collegamento di rete è stato attivato.
	Non è stato selezionato alcun livello di temperatura. Il regolatore del livello di temperatura è in posizione 0.	Spostare il livello del regolatore della temperatura in posizione 1, 2 o 3.
	si è attivata la protezione contro il surriscaldamento.	Far controllare il dispositivo.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

11.1 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

**CERTIFICATO DI GARANZIA****Prodotto** _____**Acquistato in data** _____**Rivenditore** _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com