



**MOPEDIA®**



## **PORTABOMBOLA IN TESSUTO**

---

### **MANUALE DI ISTRUZIONI**

## INDICE

1. CODICI .....	pag. 3
2. INTRODUZIONE .....	pag. 3
3. DESTINAZIONE D'USO .....	pag. 3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....	pag. 3
4.1 Norme e direttive di riferimento .....	pag. 3
5. AVVERTENZE GENERALI .....	pag. 4
6. DESCRIZIONE GENERALE .....	pag. 4
6.1 Vista ed elenco delle parti .....	pag. 4
7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO .....	pag. 4
7.1 Montaggio .....	pag. 4
7.2 Smontaggio .....	pag. 4
8. PRIMA DI OGNI USO .....	pag. 4
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO .....	pag. 5
10. MODALITÀ D'USO .....	pag. 5
11. MANUTENZIONE .....	pag. 5
12. PULIZIA E DISINFEZIONE .....	pag. 5
12.1 Pulizia .....	pag. 5
12.2 Disinfezione .....	pag. 5
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....	pag. 5
14. PARTI DI RICAMBIO .....	pag. 6
15. CARATTERISTICHE TECNICHE .....	pag. 6
15.1 Dimensioni .....	pag. 6
15.2 Specifiche tecniche .....	pag. 6
16. GARANZIA .....	pag. 6
17. RIPARAZIONI .....	pag. 6
18. RICAMBI .....	pag. 7
19. CLAUSOLE ESONERATIVE .....	pag. 7

**CE** Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46  
attuazione della direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

## 1. CODICI

**RCA136** Portabombola in tessuto

**CPA606** Portabombola in tessuto

## 2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un accessorio by Moretti. Gli accessori by Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell' accessorio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l' accessorio da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

## 3. DESTINAZIONE D'USO

Il **portabombola** è destinato principalmente a persone che hanno difficoltà motorie e respiratorie. Tuttavia sono versatili sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

**NOTA:** Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

### ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

## 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia accessori per sedie e carrozzine è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
4. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.**
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE.**
6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I.
7. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
8. La Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

### 4.1 Norme e direttive di riferimento

Test di sicurezza prescritti dalla norma UNI EN 12182:2001

## 5. AVVERTENZE GENERALI



### ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di bambini
- Non eccedere il carico massimo consentito

## 6. DESCRIZIONE GENERALE

### 6.1 Vista ed elenco delle parti

Il portabombola viene fornito come un pezzo unico, pronto all'uso.

## 7. MONTAGGIO/SMONTAGGIO

### 7.1 Montaggio

 **Diametro max bombola: 12 cm**

1. Disimballare il prodotto e verificare che il contenuto corrisponda alla descrizione delle parti del presente manuale.
2. Fissare le cinghie superiori sullo schienale della carrozzina o della sedia tramite le clip.
3. Fissare le cinghie inferiori sul telaio della carrozzina o della sedia tramite le clip.
4. Inserire la bombola all'interno del portabombola.
5. Adesso il vostro accessorio è pronto all'uso.



RCA136



CPA606



### 7.2 Smontaggio

Eseguire il procedimento appena descritto nel senso inverso.

## 8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al corretto inserimento e bloccaggio delle cinghie.

## 9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa.
- Eseguire le operazioni di regolazione in assenza della bombola.
- Controllare che tutti i componenti siano ben fissati.

## 10. MODALITÀ D'USO

L'assistente deve posizionare e regolare il portabombola con la massima cura onde evitare movimenti bruschi od oscillazioni pericolose. Ogni movimento del paziente deve essere controllato da un assistente.

Il portabombola viene fornito montato e sarà sufficiente estrarre le cinghie e fissarle allo schienale e telaio della carrozzina o sedia comoda tramite le apposite chiusure.

## 11. MANUTENZIONE

Controllare periodicamente l'accessorio: il corretto posizionamento dei tubi, le connessioni, gli agganci, il corretto fissaggio di viti e/o morsetti.

## 12. PULIZIA E DISINFEZIONE

### 12.1 Pulizia

Utilizzare un panno imbevuto di acqua o di una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Asciugare con un panno morbido.



### **ATTENZIONE!**

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcohol, detersivi a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia. Lavare in lavatrice o a mano con acqua a una temperatura massima di 30° con saponi o detersivi neutri e delicati.

### PRECAUZIONI:

- Usare un detersivo neutro e delicato
- Non usare un autoclave a vapore o a calore per pulire l'imbracatura
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole
- Non riscaldare
- Non usare candeggina
- Non stirare
- Non lavare con altri articoli

### 12.2 Disinfezione

Se necessario, disinfettare il prodotto utilizzando un detersivo disinfettante delicato.

## 13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

## 14. PARTI DI RICAMBIO


Per le parti di ricambio e gli accessori fare sempre riferimento al catalogo Master MORETTI. UTILIZZARE SOLO ACCESSORI ORIGINALI MORETTI. IN CASO DIVERSO SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU INCIDENTI CAUSATI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

## 15. CARATTERISTICHE TECNICHE

### 15.1 Dimensioni

**RCA136** Portabombola in tessuto

**CPA606** Portabombola in tessuto

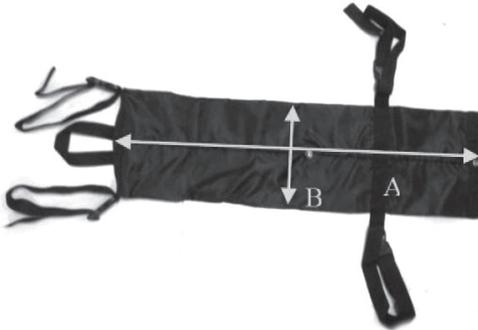

Altezza "A": 68 cm

Larghezza "B": 19 cm

Circonferenza max bombola: 12 cm

Portata: 20 kg circa

### 15.2 Specifiche tecniche

- Tessuto Poliestere
- Cinghie in Polipropilene
- Colore Nero

## 16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## 17. RIPARAZIONI

### Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si

determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

**Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia**

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

**Prodotto non difettoso**

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

**18. RICAMBI**

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

**19. CLAUSOLE ESONERATIVE**

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



**CERTIFICATO DI GARANZIA**

**Prodotto** \_\_\_\_\_

**Acquistato in data** \_\_\_\_\_

**Rivenditore** \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

**Venduto a** \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MADE IN P.R.C.**

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)



**MOPEDIA®**



## **OXYGEN BOTTLE HOLDER**

---

### **INSTRUCTION MANUAL**

## INDEX

1. CODES .....	pag. 3
2. INTRODUCTION .....	pag. 3
3. INTENDED USE .....	pag. 3
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY .....	pag. 3
4.1 Standards and guidelines reference .....	pag. 3
5. GENERAL WARNINGS .....	pag. 4
6. GENERAL DESCRIPTION .....	pag. 4
6.1 View and List of Components .....	pag. 4
7. ASSEMBLING/DISASSEMBLING .....	pag. 4
7.1 Assembling .....	pag. 4
7.2 Disassembling .....	pag. 4
8. BEFORE USE .....	pag. 4
9. PRECAUTIONS FOR USE .....	pag. 5
10. HOW TO USE .....	pag. 5
11. MAINTENANCE .....	pag. 5
12. CLEANING AND DISINFECTION .....	pag. 5
12.1 Cleaning .....	pag. 5
12.2 Disinfection .....	pag. 5
13. CONDITIONS OF DISPOSAL .....	pag. 5
14. SPARE PARTS .....	pag. 6
15. TECHNICAL FEATURES .....	pag. 6
15.1 Dimension .....	pag. 6
15.2 Technical specifications .....	pag. 6
16. WARRANTY .....	pag. 6
17. REPAIRING .....	pag. 6
18. SPARE PARTS .....	pag. 7
19. EXEMPT CLAUSES .....	pag. 7


**Class I Medical Equipment**  
 according Directive 93/42/EEC and subsequent amendment

## 1. CODES

**RCA136** Oxygen bottle holder

**CPA606** Oxygen bottle holder

## 2. INTRODUCTION

Thank you for choosing an accessories manufacturer by MORETTI S.p.A. Their design and quality are a guarantee of comfort, safety and reliability. The accessory by MORETTI S.p.A. is designed and built to meet all your demands for a practical, correct use. This user manual provides some suggestions to correctly use the accessory you have chosen and offers a lot of valuable advice for your safety. Please read carefully through the manual before using the accessory. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

## 3. INTENDED USE

The **Oxygen bottle holder** is primarily intended for people who have mobility and respiratory problems. However they are adaptable both in hospitals and home.

**NOTE:** Check that the product has not been damaged during shipment. In case of damage do not use it and contact your dealer for further instructions

### WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual.
- Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product.
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

## 4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to wheelchairs and aid accessories range are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/ EEC and further modifications. For this purpose Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/ EEC as prescribed by Annex VII of the above directive.
2. The full list of the devices at issue are specified in Annex A in declaration.
3. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES.
4. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION.
5. The devices in question are sold in NON STERILE packing.
6. The devices in question should be considered as belonging to class I.
7. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC and further modifications to the proper authorities.

### 4.1 Standards and guidelines reference

Test di sicurezza prescritti dalla norma UNI EN 12182:2001

## 5. GENERAL WARNINGS



### WARNING!

Always pay close attention to the presence of moving parts that could cause limb entrapment and injury.

- For proper use of the device refer to this manual.
- For proper use of the device consult your doctor or therapist.
- Keep the packaged product away from any source of heat because the packaging is made of cardboard.
- The shelf-life of the accessory is determined by the wear of parts that cannot be repaired and / or replaced.
- Be careful when children are nearby.
- Do not exceed the maximum payload.

## 6. GENERAL DESCRIPTION

### 6.1 View and List of Components

The Oxygen bottle holder is provided as a single piece, ready to use.

## 7. ASSEMBLING/DISASSEMBLING

### 7.1 Assembling

 Max diameter Oxygen bottle: 12 cm

1. Unpack the product and check that the content matches with the description of the parts in the manual.
2. Fix the upper belts on the back of the wheelchair or chair by using the clips.
3. Fix the lower belts on the frame of the wheelchair or chair by using the clips.
4. Place the Oxygen bottle inside the Oxygen bottle holder.
5. Now the Oxygen bottle holder is ready for use.



RCA136



CPA606



### 7.2 Disassembling

To disassemble do the exact opposite of the above instructions.

## 8. BEFORE USE

- Always check the status of the mechanical parts to guarantee they are used in total safety.
- Check the device is properly assembled. Pay particular attention to the locking of the belt.

## 9. PRECAUTIONS FOR USE

- Do not exceed the maximum load capacity.
- Make the adjustment operations without Oxygen bottle.
- Check all components are well fixed.

## 10. HOW TO USE

The assistant must place and adjust the Oxygen bottle holder with the maximum care to avoid sudden movements or dangerous oscillations. An assistant has to check any movement of the patient.

The Oxygen bottle holder is ready to use and will be sufficient to pull out the belts and fix it on the backrest and the frame of the wheelchair or commode chair through the appropriate clips.

## 11. MAINTENANCE

Controllare periodicamente l'accessorio: il corretto posizionamento dei tubi, le connessioni, gli agganci, il corretto fissaggio di viti e/o morsetti.

## 12. CLEANING AND DISINFECTION

### 12.1 Cleaning

Use a damp cloth or a solution of lukewarm water and neutral soap.



#### **WARNING!**

Do not use abrasive substances, acids, alkali, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of the metal surfaces.

The manufacture company is not responsible for any damage caused by using materials that can damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

If you need, Use machine wash with a gentle cycle or hand wash 30°C with neutral soaps or detergents and delicate.

#### PRECAUTIONS:

- Do not Bleach
- Do not dry clean
- Dry Flat away from direct sunlight
- Tumble dry low
- Do not iron
- Use non-enzyme detergent
- Do not wash with other colors

### 12.2 Disinfection

If you need to disinfect the product, use a common delicate disinfectant neutral detergent..

## 13. CONDITIONS OF DISPOSAL

When disposing of the device, never use the normal return systems of municipal solid waste. It is recommended instead the disposal through the joint municipal ecological islands for the expected operations of recycling the materials used.

## 14. SPARE PARTS


For spare parts and accessories, please always refer to the MORETTI master catalogue.  
**ONLY USE ORIGINAL MORETTI ACCESSORIES. MORETTI S.P.A. COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENT CAUSED BY IMPROPER USE.**

## 15. TECHNICAL FEATURES

### 15.1 Dimension

**RCA136** Oxygen bottle holder

**CPA606** Oxygen bottle holder

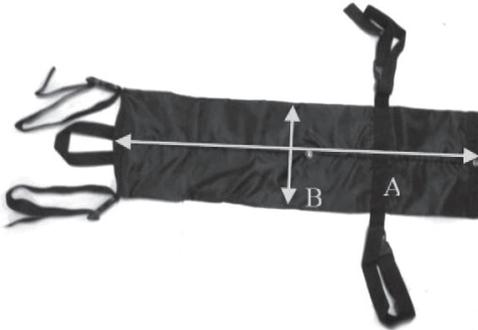

Height "A": 68 cm

Width "B": 19 cm

Oxygen bottle MAX diameter: 12 cm

Pay load : 20 kg

### 15.2 Technical specifications

- Polyester tissue
- PP belts
- Black Color

## 16. WARRANTY

Every Moretti product is guaranteed for 2 (two) YEARS from the purchase date, except the restrictions specified below. The warranty shall not apply in case of damage caused by improper use, abuse, alterations of the product or any other use not in compliance with the user manual.

The proper use of the product is indicated in the user manual. Moretti S.p.A. shall not be liable for any damages or personal injuries due to incorrect assembly/improper use of the device, not compliant with the user manual. Moretti does not guarantee its products against damages or faults in the following cases: natural disasters, non authorized maintenance or reparations, damages caused by electrical supply problems (if provided), use of parts or components not provided by Moretti, failure in accomplishing the guidelines and instructions for use, non authorized alterations, damages due to the transport (different from Moretti original delivery) or failure in maintaining the device as indicated in the manual. The components subject to wear are not covered by this warranty if the damage is due to the normal use of the product.

## 17. REPAIRING

### Warranty repair

If a Moretti product shows material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti S.p.A., together with the customer, will consider whether the product fault is covered by warranty. Moretti S.p.A., at its unquestionable discretion, may replace or repair the item under warranty in a Moretti reseller point or at its own qualified offices. Labour costs for repairing the product may be at Moretti's expense if it is determined the reparation is under warranty. A reparation or replacement does not renew nor extend the warranty.

**Repair not covered by warranty**

A product, not covered by warranty, may be returned for reparation only after receiving prior authorization from Moretti customer service. Labour and delivery costs for an out-of-warranty reparation will be fully at the customer's or reseller's expense. Reparations of out-of-warranty products are guaranteed for 6 (six) months, from the day the customer receives the repaired product.

**Non defective device**

The customer is informed if, after examining and testing a returning product, Moretti decides the product is not defective. The product will be sent back to the customer and all the return delivery costs will be at his expense.

**18. SPARE PARTS**

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the day you receive them.

**19. EXEMPT CLAUSES**

Except what clearly specified in this warranty and in accordance with the law, Moretti S.p.A. does not offer its customers any other declaration, warranty or condition, expressed or implicit, including any declaration, warranty or condition of merchantability, of non violation or non interference, of suitability for a specific aim. Moretti S.p.A. does not guarantee that the use of Moretti products will be continuous and faultless. The duration of possible implicit warranties that may be applied in accordance with the law is limited to the warranty period. Some states or countries do not allow limitations to the duration of an implicit warranty, or the exoneration, or the limitations of accidental or indirect damages related to products for consumers. In such states or countries some exonerations or limitation of this warranty may not be applied to the user. This warranty is subject to modifications without any prior notice.


**WARRANTY CERTIFICATE**
**Product** \_\_\_\_\_

**Purchased on (date)** \_\_\_\_\_

**Retailer** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

**Sold to** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_


**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com email: info@morettispa.com**
**MADE IN P.R.C.**

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)