



GIMA

**GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE**

***PORTABLE RESUSCITATOR BAG
FIRST AID BASIC GUIDE***

**BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS**

***BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS***

**BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO**

***ΦΟΡΗΤΟ ΜΠΑΛΛΟΝΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Γρήγορος οδηγός πρώτων βοηθειών***

**كرة مطاطية منعشة سهلة النقل
دليل سريع للإسعاف الأولي**

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com




Pallone rianimatore portatile

Guida rapida di pronto soccorso




1 - Verificare che il paziente sia lontano da fonti di pericolo: fumo, fuoco, acqua, gas, esalazioni, cavi elettrici in tensione, ecc.

2 - Controllare che le vie respiratorie non siano ostruite. In caso vi siano corpi estranei, acqua o saliva liberarle utilizzando, se disponibile, un cuneo apribocca e posizionandolo fra i denti del paziente per evitare ferite alle dita.

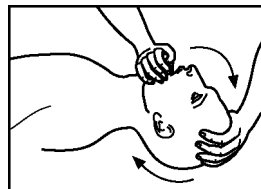

3 - Posizionare il capo del paziente all'indietro spingendo le mascelle verso l'alto per distendere il collo e aprire le vie respiratorie.



4 - Controllare se il paziente respira e se il colorito della pelle ritorna normale. In questo caso giratelo sullo stomaco in posizione da coma con i piedi in alto e la testa verso il basso. Chiamate un dottore o un'ambulanza.

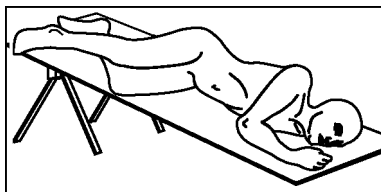


Nel caso la respirazione non riprenda da sola intervenite con la respirazione artificiale senza interruzione fino a che il paziente non respira da solo o non arrivi un medico.

5 - Respirazione artificiale con il Pallone Gima

Premere la maschera sul viso del paziente, coprendo bocca e naso. Tenere la testa completamente rovesciata all'indietro e con la mano che tiene la maschera spingere in avanti le mascelle. Comprimate il pallone a fondo e controllate che il torace si espanda. Per mantenere aperte le vie respiratorie potete utilizzare una delle canule in dotazione posizionandola sotto la maschera. Fate attenzione che la gola non venga ostruita dalla lingua, in caso di ostruzione utilizzate l'apposita pinza per tirarla verso l'esterno.

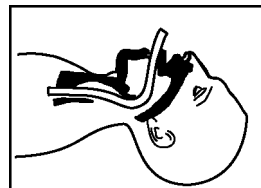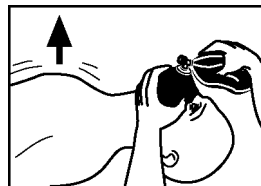

6 - Allentate immediatamente la pressione sul pallone e attendete lo svuotamento del torace. Ripetere l'operazione 10-20 volte al minuto. Se avete a disposizione dell'ossigeno, introducetelo dal connettore apposito in misura non superiore ai 2-4 litri al minuto. Controllare sul collo del paziente la presenza della pulsazione. Se la pulsazione è presente: Continuare la respirazione artificiale finché egli non respiri autonomamente

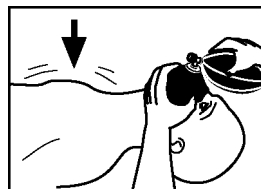

Se la pulsazione non è presente: Il cuore si è fermato. Agite con la massima urgenza poichè dopo 4 minuti il cervello potrebbe subire danni.

7 - Nel caso di arresto cardiaco è necessaria la compressione cardiaca esterna. Con entrambe le mani poste sul torace all'altezza del cuore, comprimate con forza 60-70 volte al minuto. Durante la compressione deve essere percepita la pulsazione al collo. **ATTENZIONE:** Nei bambini comprimate con meno forza e una sola mano. Ogni 5-8 compressioni eseguite un'insufflazione di respirazione artificiale. Continuate la compressione finché la pulsazione al collo sia ben definita e comunque per almeno un ora. Anche dopo che il cuore avrà ripreso a battere potrebbe essere necessaria la respirazione artificiale per un tempo considerevole.

