



**MOPEDIA®**

ITALIANO

MA RP729x-RP73x-RP74x 05 A\_06-2019

## **DEAMBULATORI BASSI**

---

## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

## INDICE

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1. CODICI.....                                                | Pag.3  |
| 2. INTRODUZIONE.....                                          | Pag.3  |
| 3. DESTINAZIONE D'USO .....                                   | Pag.3  |
| 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .....                       | Pag.4  |
| 5. AVVERTENZE GENERALI.....                                   | Pag.4  |
| 6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA .....                                | Pag.4  |
| 7. DESCRIZIONE GENERALE.....                                  | Pag.5  |
| 7.1 Regolazione altezza.....                                  | Pag.5  |
| 8. PRIMA DI OGNI USO .....                                    | Pag.5  |
| 9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO .....                            | Pag.5  |
| 10. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RP729X.....                       | Pag.5  |
| 11. MODALITÀ D'USO.....                                       | Pag.6  |
| 12. MANUTENZIONE.....                                         | Pag.7  |
| 13. PULIZIA E DISINFEZIONE.....                               | Pag.7  |
| 13.1 Pulizia .....                                            | Pag.7  |
| 13.2 Disinfezione.....                                        | Pag.7  |
| 14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....                           | Pag.8  |
| 15. CARATTERISTICHE TECNICHE.....                             | Pag.8  |
| 15.1 Parti di ricambio ed accessori.....                      | Pag.10 |
| 16. GARANZIA .....                                            | Pag.10 |
| 17. RIPARAZIONI.....                                          | Pag.11 |
| 17.1 Riparazioni in garanzia .....                            | Pag.11 |
| 17.2 Riparazione di un prodotto non coperto da garanzia ..... | Pag.11 |
| 17.3 Prodotti non difettosi.....                              | Pag.11 |
| 18. RICAMBI.....                                              | Pag.11 |
| 19. CLAUSOLE ESONERATIVE .....                                | Pag.11 |

## **CE** Dispositivo Medico di classe I

D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

### **1. CODICI**

#### **Deambulatori con quattro puntali**

- RP729S-M-L** Deambulatore fisso altezza regolabile
- RP730S-M-L** Deambulatore pieghevole con 1 pulsante - regolabile in altezza
- RP731** Deambulatore pieghevole regolabile bambini
- RP747** Deambulatore pieghevole doppio appoggio regolabile in altezza
- RP749M-L** Deambulatore pieghevole doppia funzione fisso/oscillante - regolabile in altezza

#### **Deambulatori con due ruote e due puntali**

- RP734** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 ruote piroettanti
- RP735S-M-L** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 ruote fisse
- RP736** Deambulatore con ruote regolabile in altezza bambini
- RP737** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 puntali con sistema autobloccante
- RP744** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 ruote piroettanti
- RP745** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 ruote fisse

#### **Deambulatori con quattro ruote**

- RP733S-M-L** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza ruote piroettanti
- RP738** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza 2 ruote con sistema autobloccante
- RP741** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
- RP748** Deambulatore smontabile regolabile in altezza, 2 ruote piroettanti con freno e 2 ruote piroettanti
- RP742** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza con freno azionabile a mano
- RP743** Deambulatore pieghevole regolabile in altezza con 2 ruote gemellate con rotazione frizionata

### **2. INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto un ausilio della linea MOPEDIA by Moretti. I deambulatori Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

### **3. DESTINAZIONE D'USO**

I deambulatori MOPEDIA by Moretti sono ausili maneggiati da due braccia adatti a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

#### **ATTENZIONE!**



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale.
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.

#### 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE.**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I.
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A..
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

#### 5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista.
- Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore.
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.

#### 6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Codice prodotto



Identificativo univoco del dispositivo



Marchio CE



Fabbricante



Lotto di produzione



Leggere il manuale per le istruzioni



Dispositivo Medico



Condizioni di smaltimento



Smaltimento

## 7. DESCRIZIONE GENERALE

I Deambulatori MOPEDIA sono realizzati in alluminio anodizzato leggero, sono pieghevoli o smontabili (tranne RP729) hanno manopole imbottite e/o puntali antiscivolo e ruote fisse o piroettanti. Regolabili in altezza ogni 2.5 cm. I suddetti dispositivi facilitano lo spostamento a persone con limitato equilibrio statico e/o dinamico, aumentando l'ampiezza alla base d'appoggio. Forniscono sostegno nelle situazioni di ipostenia e/o paresi degli arti inferiori. Aiutano a scaricare sulle braccia parte del peso della persona, quando sia richiesta una limitazione del carico su uno o entrambi gli arti inferiori.



### 7.1 Regolazione altezza

Premere il pulsante a molla e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia ben inserito prima dell'utilizzo del dispositivo stesso. Controllare che tutte e quattro le gambe siano alla stessa altezza.

## 8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre che i freni funzionino prima di usare il deambulator, dove presenti;
- Non usare il deambulator se è danneggiato o presenta malfunzionamenti;
- Contattare il rivenditore per eventuali riparazioni;
- Gli utenti devono muoversi su percorsi pedonali e non su strade trafficate;
- Tenere conto della possibilità di lesioni da intrappolamento; evitare di collocare le dita tra le parti mobili del deambulator. Prestare particolare attenzione chiudendo e aprendo il deambulator.

## 9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

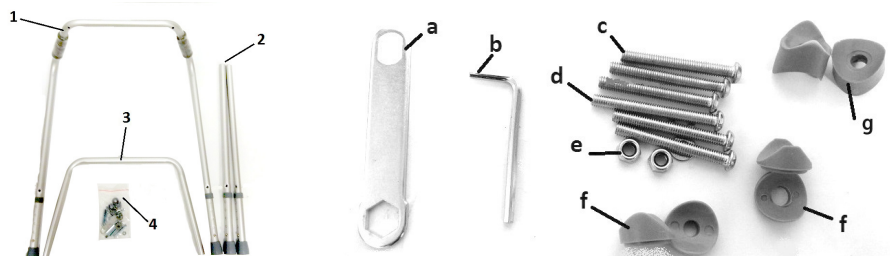
Questo dispositivo fornisce una maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la marcia. In ogni caso, non può essere usato da persone con una funzionalità della mano e/o del braccio visibilmente debole e anche da persone con problemi di equilibrio. Il deambulator può essere usato sia all'esterno che all'interno. Si consiglia l'uso solamente su superfici sulle quali tutte e quattro le gambe toccano per terra. Non deve essere usato su terreno roccioso o su piani inclinati perché il deambulator può risultare instabile. Il dispositivo non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale.

- Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose;
- Non superare il peso massimo paziente riportato sull'etichetta prodotto e nel capitolo caratteristiche tecniche del presente manuale;
- Evitare l'impiego su pendii superiori ai 10 (gradi) e per girarsi su un piano inclinato il disabile deve essere assistito da un operatore;
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto nonché lo stato dei puntali di appoggio e delle ruote. Sostituirli una volta usurati;
- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore;
- Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.


## 10. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RP729X

Lista parti

1. Telaio portante (1 Pz)
2. Gambe (2 Pz)
3. Tubo piegato (1 Pz)
4. Kit di assemblaggio (1 Pz)




- a. Aprire il Kit di assemblaggio e iniziare l'assemblaggio prendendo il telaio portante (1).
- b. Assemblare sul telaio portante (1) le gambe (2) con le rondelle a sella (f) e le viti corte (c). Non serrare completamente le viti.
- c. Assemblare sul lato anteriore del telaio portante (1) il tubo piegato (3) con le rondelle a sella (g), le viti lunghe (d) e dado con rondella (e). Non serrare completamente le viti.
- d. Assemblare sul telaio portante (1) il tubo piegato (3) con le rondelle a sella (f) e le viti corte (c). Non serrare completamente le viti.
- e. Stringere bene tutte le viti, il deambulatore è così pronto all'uso. (Vedi foto sotto)

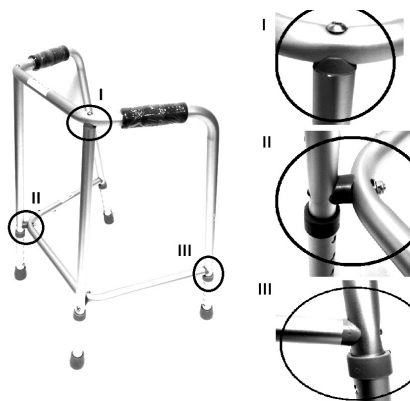

## 11. MODALITÀ D'USO

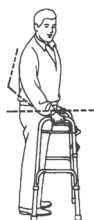**Nota:** Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza di questo manuale di istruzioni. Utilizzare il deambulatore come dispositivo di aiuto per la deambulazione. Per fare questo utilizzare le due impugnature e spingere in avanti l'ausilio ottenendo così un supporto pratico e affidabile per camminare.




Con il braccio steso, l'impugnatura del deambulatore deve essere all'altezza del polso. Con la mano appoggiata sull'impugnatura, il gomito deve essere piegato di 20°-30°.



### ATTENZIONE!

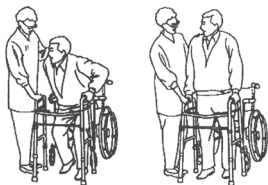Alla presenza di fili elettrici a terra, pavimento bagnato, tappeti, giocattoli o altri ostacoli, mobili, scalini e pavimenti sconnessi. Non usare deambulatore per salire o scendere le scale o sulle scale mobili.



1. Per trasferire il paziente dalla carrozzina al deambulatore assicurarsi che le ruote della carrozzina e del deambulatore (se provvisto) siano bloccate.



#### ATTENZIONE!

Per il trasferimento e i primi passi farsi aiutare da un operatore.



2. a) Deambulatori con puntali: per camminare con il deambulatore, alzarlo e posarlo comodamente davanti a se stessi assicurandosi che tutte e quattro le gambe siano appoggiate a terra. Camminare con prudenza facendo un passo alla volta.

b) Deambulatori con ruote: Per camminare con il deambulatore, spingerlo comodamente davanti a se stessi assicurandosi che tutte e quattro le gambe, anche quelle dotate di ruote siano appoggiate a terra. Camminare con prudenza facendo un passo alla volta.

**Nota:** Il deambulatore deve essere sempre impugnato per le manopole.



#### ATTENZIONE!

Non spingere il deambulatore troppo lontano dal corpo. Questo potrebbe causare cadute e carichi inadeguati.

## 12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. Per ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:

- La struttura portante del deambulatore e parti di collegamento;
- Controllare montaggio e funzionamento delle ruote con relativo freno, dove presenti;
- Verificare tutti i punti di saldatura;
- Verificare l'usura dei puntali ove presenti.

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

## 13. PULIZIA E DISINFEZIONE

### 13.1 Pulizia

Utilizzare esclusivamente un panno umido per rimuovere la polvere, usare un panno umido con del sapone neutro per rimuovere lo sporco più difficile. Asciugare bene prima dell'utilizzo. Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C. Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore.

### 13.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

**Nota:** Evitare assolutamente l' utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

## 14. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

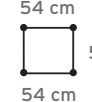


In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

## 15. CARATTERISTICHE TECNICHE

| Codici                    | Portata max | H regolabile ogni 2,5 cm | Puntali/ruote       | Base*                                                                               | Base**                                                                              |
|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP731</b><br>(bambini) | 60 kg       | Da 53 a 62,5 cm          | 4 puntali           |    | -                                                                                   |
| <b>RP736</b><br>(bambini) | 60 kg       | Da 41 a 60 cm            | 2 ruote e 2 puntali |    | -                                                                                   |
| <b>RP729S</b>             | 110 kg      | Da 65 a 75 cm            | 4 puntali           |    |    |
| <b>RP729M</b>             |             | Da 76 a 86 cm            |                     |    |    |
| <b>RP729L</b>             |             | Da 86 a 96 cm            |                     |    |    |
| <b>RP730S</b>             | 130 kg      | Da 68 a 78 cm            | 4 puntali           |   |   |
| <b>RP730M</b>             |             | Da 77 a 87 cm            |                     |  |  |
| <b>RP730L</b>             |             | Da 83 a 101 cm           |                     |  |  |
| <b>RP749M</b>             | 130 kg      | Da 77,5 a 87,5 cm        | 4 puntali           |  |  |
| <b>RP749L</b>             |             | Da 83,5 a 101,5 cm       |                     |  |  |

| Codici | Portata max | H regolabile ogni 2,5 cm | Puntali/ruote       | Base*                                                                                     | Base**                                                                                    |
|--------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP747  | 130 kg      | Da 71 a 89 cm            | 4 puntali           |  51 cm   |  52 cm   |
| RP735S | 130 kg      | Da 68,5 a 78,5 cm        | 2 ruote e 2 puntali |  46 cm   |  48 cm   |
| RP735M | 130 kg      | Da 76 a 86 cm            | 2 ruote e 2 puntali |  48 cm   |  50 cm   |
| RP735L | 130 kg      | Da 83 a 101 cm           | 2 ruote e 2 puntali |  49,5 cm |  53,5 cm |
| RP745  | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 2 ruote e 2 puntali |  49 cm   |  53 cm   |
| RP737  | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 2 ruote e 2 puntali |  53 cm   |  57 cm   |
| RP734  | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 2 ruote e 2 puntali |  50 cm  |  54 cm  |
| RP744  | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 2 ruote e 2 puntali |  50 cm |  55 cm |
| RP738  | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 4 ruote             |  55 cm |  59 cm |
| RP733S | 130 kg      | Da 70 a 80 cm            | 4 ruote             |  55 cm |  56 cm |
| RP733M | 130 kg      | Da 78 a 88 cm            | 4 ruote             |  56 cm |  58 cm |
| RP733L | 130 kg      | Da 84 a 102 cm           | 4 ruote             |  58 cm |  62 cm |


| Codici | Portata max | H regolabile ogni 2,5 cm | Puntali/ruote                         | Base*                                                                                            | Base**                                                                                           |
|--------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP741  | 100 kg      | Da 86 a 96 cm            | 4 ruote<br>2 con freno                |  54 cm<br>58 cm |  56 cm<br>59 cm |
| RP743  | 120 kg      | Da 85 a 103 cm           | 4 ruote<br>2 con rotazione frizionata |  57 cm<br>60 cm |  59 cm<br>61 cm |
| RP742  | 130 kg      | Da 86 a 103 cm           | 4 ruote<br>con freno                  |  54 cm<br>59 cm |  60 cm<br>60 cm |
| RP748  | 130 kg      | Da 77 a 92 cm            | 4 ruote<br>con freno                  |  54 cm<br>54 cm |  54 cm<br>54 cm |

\*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

\*\* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.

Le misure possono variare di  $\pm 1$  cm

### 15.1 Parti di ricambio ed accessori

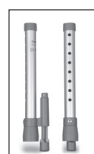


**RV7052**  
Gambe con sistema autobloccante - paio




**RV7053**  
Ruote con rotazione frizionata - paio



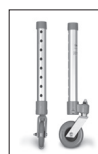
**RV7053G**  
Ruote gemellate con rotazione frizionata  $\varnothing$  10cm - paio



**RV7054-5**  
**RV7054-8**  
Ruote piroettanti con 5 o 8 fori - paio

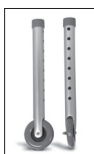

**RV7055-5**  
**RV7055-8**  
Ruote fisse 5 o 8 fori - paio

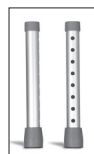

**RV7056-5**  
**RV7056-8**  
Gambe complete con 5 o 8 fori - paio



**RV7051S**  
Ruote piroettanti 5 fori - paio



**RV7051F**  
Ruote piroettanti con freno 5 fori - paio



**RV7121-8**  
Ruote piroettanti 8 fori  $\varnothing$  10cm - paio



**RV7154-8**  
Ruote piroettanti 8 fori  $\varnothing$  12 cm - paio



**RV7155-8**  
Ruote fisse 8 fori  $\varnothing$  12cm - paio



**RV7015**  
Ruote piroettanti  $\varnothing$  8 cm - paio



**RV7016**  
Ruote piroettanti con freno  $\varnothing$  8 cm



**RV7035**  
Puntali - paio per RP729



**RV7030**  
 $\varnothing$  28mm  
Puntali colore grigio paio



**RV7031**  
 $\varnothing$  28mm  
Puntali colore nero - paio



**RV7045**  
Cestino per deambulatori ad un pulsante



**RV7046**  
Cestino per deambulatori ad due pulsante



**RV7114**  
Appoggio brachiale - paio



**RP758**  
Sedile per RP748

## 16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## 17. RIPARAZIONI

### 17.1 Riparazione in garanzia

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

### 17.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### 17.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## 18. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

## 19. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge.

Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure

l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente.

**CERTIFICATO DI GARANZIA****Prodotto** \_\_\_\_\_**Acquistato in data** \_\_\_\_\_**Rivenditore** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Località** \_\_\_\_\_**Venduto a** \_\_\_\_\_**Via** \_\_\_\_\_ **Località** \_\_\_\_\_

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C



**MOPEDIA®**

ENGLISH

MA RP729x-RP73x-RP74x 05 A\_06-2019

**WALKERS**

---

**INSTRUCTIONS MANUAL**

## INDEX

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 1. CODES .....                           | Pag.15 |
| 2. INTRODUCTION .....                    | Pag.15 |
| 3. INTENDED USE .....                    | Pag.15 |
| 4. EC DECLARATION OF CONFORMITY .....    | Pag.15 |
| 5. GENERAL WARNING .....                 | Pag.16 |
| 6. SYMBOLS.....                          | Pag.16 |
| 7. GENERAL DESCRIPTION .....             | Pag.16 |
| 7.1 To adjust height .....               | Pag.17 |
| 8. BEFORE USE .....                      | Pag.17 |
| 9. WARNINGS FOR USE .....                | Pag.17 |
| 10. ASSEMBLY INSTRUCTIONS RP729X.....    | Pag.17 |
| 11. HOW TO USE .....                     | Pag.18 |
| 12. MAINTENANCE .....                    | Pag.19 |
| 13. CLEANING AND DISINFECTION.....       | Pag.19 |
| 13.1 Cleaning .....                      | Pag.19 |
| 13.2 Disinfection .....                  | Pag.19 |
| 14. CONDITIONS OF DISPOSAL .....         | Pag.19 |
| 15. TECHNICAL FEATURES .....             | Pag.19 |
| 15.1 Spare parts and accessories .....   | Pag.22 |
| 16. WARRANTY .....                       | Pag.22 |
| 17. REPAIR .....                         | Pag.23 |
| 17.1 Warranty repair.....                | Pag.23 |
| 17.2 Repair not covered by warranty..... | Pag.23 |
| 17.3 Non-defective device.....           | Pag.23 |
| 18. SPARE PARTS .....                    | Pag.23 |
| 19. EXEMPT CLAUSES.....                  | Pag.23 |



I Class Medical Device

according to Directive 93/42/EEC and further modifications

## 1. CODES

### Walkers with 4 tips

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>RP729S-M-L</b> | Fixed walker adjustable height                    |
| <b>RP730S-M-L</b> | Foldable walker adjustable height                 |
| <b>RP731</b>      | Foldable walker adjustable height child model     |
| <b>RP747</b>      | Foldable walker adjustable height double handgrip |
| <b>RP749M-L</b>   | Foldable walker adjustable height double function |

### Walkers with two swivel castors and two tips

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>RP734</b>      | Foldable walker adjustable height, 2 swivel castors and 2 tips |
| <b>RP735S-M-L</b> | Foldable walker adjustable height, 2 fixed castors and 2 tips  |
| <b>RP736</b>      | Foldable walker adjustable height 2 castors, child model       |
| <b>RP737</b>      | Foldable walker adjustable height, 2 fixed castors and 2 tips  |
| <b>RP744</b>      | Foldable walker adjustable height, 2 swivel castors and 2 tips |
| <b>RP745</b>      | Foldable walker adjustable height, 2 fixed castors and 2 tips  |

### Walkers with four castors

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP733S-M-L</b> | Foldable walker adjustable height, 4 swivel castors                                   |
| <b>RP738</b>      | Foldable walker adjustable height, 2 self locking castors and 2 swivel castors        |
| <b>RP741</b>      | Foldable walker adjustable height, 4 swivel castors, 2 with brakes                    |
| <b>RP748</b>      | Demontable walker adjustable height, 2 swivel with brake castors and 2 swivel castors |
| <b>RP742</b>      | Foldable walker with hand brake                                                       |
| <b>RP743</b>      | Foldable walker adjustable in height, 2 self locking twin castors, 2 swivel castors   |

## 2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a MOPEDIA walker by Moretti S.p.A. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance.

## 3. INTENDED USE

The Mopedi by Moretti walkers are devices to be used with two arms and are intended for people with movement difficulties.

### WARNING!



- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual;
- Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product;
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

## 4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the cane aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own

responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/ EEC as prescribed by Annex VII of the above directive;
2. The devices in question **ARE NOT MEASUREMENT DEVICES**;
3. The devices in question **ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION**
4. The devices in question are sold in **NON STERILE** packing;
5. The devices in question should be considered as belonging to class I;
6. **DO NOT** use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.;
7. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications.

## 5. GENERAL WARNINGS

- READ carefully the entire manual before using the device;
- Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use of the walker;
- Make sure that the product is delivered complete and keep it packed away from heat sources;
- SERVICE LIFE- the device use limit is defined by the wear of the parts;
- DO NOT allow children to play or operate the device.

## 6. SYMBOLS



Product code



Unique Device Identification



CE mark



Manufacturer



Batch Lot



Read the instruction manual



Medical Device



Conditions of disposal



Disposal

## 7. GENERAL DESCRIPTION

The walkers MOPEDIA are realized in lightweight anodized aluminum tubing with padded handles, non-slip rubber tips and/or swivel castors and/or fixed castors. They are height adjustable every 2,5 cm. These devices facilitate people movement with limited static equilibrium and / or dynamic, increasing the amplitude to the supporting base. They provide support in situations of weakness and/or paralysis of the lower limbs. Helps to download on the arms part of the weight

of the person, where it is required a limitation of the load on one or both lower limbs.



### 7.1 To adjust height

To adjust the height, press the push button and slide the cane to the desired height. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole when finished. Repeat described procedure for each leg, at the end, check all four legs have the same height.

## 8. BEFORE USE

- Always check that the brakes work before using the walker, if available;
- Do not use the walker if it is damaged or malfunctioning please contact retailer for repaing;
- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things;
- Users must travel along pedestrian paths and not on busy roads;
- Pay attention to the possibility of injury from entrapment; avoid placing your fingers between the moving parts of the walker. Pay attention closing and opening the walker.

## 9. WARNINGS FOR USE

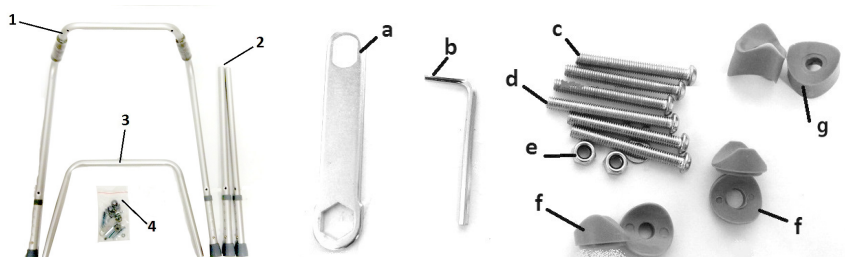
This device provides greater stability, support and safety while moving. In any case, it can not be used by people with a functionality of the hand and / or arm visibly weak and even by people with balance problems. The walker can be used both outside and inside. We recommend using only on surfaces on which all four legs touch the ground. It should not be used on rocky terrain or on inclined surfaces because the walker can become unstable. The device is not designed for the transport of persons or other material

- Use extra caution on wet and slippery surfaces;
- DO NOT use with patient who exceed the weight indicated in the product label and in the technical features chapter of the present manual;
- Avoid use on slopes greater than 10 degrees and turn around on uphill or downhill the disabled must be assisted by an operator
- Avoid to leave the device in contact with water for long periods of time;
- Periodically check its sturdiness, the stability and the rubber tips are in good conditions. Replace them once worn out;
- In case of doubts about use, adjustment or maintenance, contact your dealer;
- Keep it away from children to avoid any possible risks;


## 10. ASSEMBLY INSTRUCTIONS RP729X

Parts list

1. Main Frame (1pc)
2. Legs (2pcs)
3. Bent tube (1pc)
4. Assembly Kit (1pc)




- a. Open the assembly kit and start the assembly taking the main frame (1)
- b. Assemble on the main frame (1) : the legs (2), the saddle washers (f) and the short screws (c). Do not tighten completely the screws.
- c. Assemble on the front side of the main frame (1): the bent tube (2) with saddle washers (g), the long screws (d), nuts and washers (e). Do not tighten completely the screws.
- d. Assemble on the main frame (1): the bent tube (2) with the saddle washers (f) and the short screws (c). Do not tighten completely the screws.
- e. Tighten all screws, the walker is now ready to use. (Look the picture below)

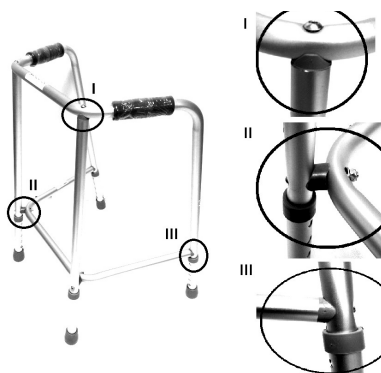

## 11. HOW TO USE

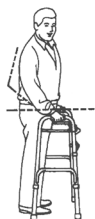**Note:** Refer to the safety instructions in this manual. Use the walker as aid device for walking. To do this use the two handles and push forward the aid thus obtaining a support convenient and reliable for walking.



With your arm extended down, handgrips should be at your wrist height. With your



### WARNING!

- Pay attention on the presence of electrical wires, wet surfaces, rugs, toys or debris, furniture, little steps and gaps in floors. Do not use the walker on stairs or escalators.



1. To transfer the patient from the wheelchair to the walker, be sure castors of the wheelchair and walker if available are locked.



### WARNING!

- For the transfer and the first steps get help by an operator.



2. a) Walkers with tips: to walk lift it up and place it comfortably in front of you, ensuring all four legs are on the floor. Walk carefully taking, one step at a time.

- b) Walkers with castors: to walk push it comfortably in front of you and ensuring all four legs even the one with castors are on the floor. Walk carefully taking, one step at a time.

**Note:** The walker must always be grasped from the handles.



Do not push the walker too far away from the body. This can cause falls and inadequate loads.

## 12. MAINTENANCE

The Mopedia devices by MORETTI are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years. For periodic inspection we mean an examination of the following parts:

- The walker frame and the connecting parts;
  - Check mounting and operation of the castors with its brake;
  - Check all the welded points;
  - Check the wear of the tips, where present;
- In case of repair must be used only approved parts and accessories.

## 13. CLEANING AND DISINFECTION

### 13.1 Cleaning

Use only a damp cloth to remove dust, use a damp cloth with a mild soap to remove more difficult dirt. Dry thoroughly before use. Never use water with temperature above 30°C. Never use jet water or steam washing machine.

### 13.2 Disinfection

If you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner.

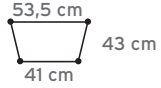
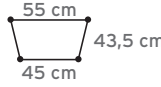
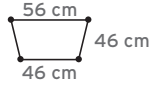
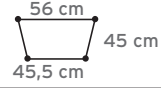
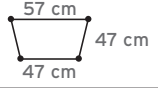
**Note:** Never use acids, alkalis or solvents such as acetone.

## 14. CONDITION OF DISPOSAL












In case of disposal of the device don't use the common container for municipal waste. We recommend to dispose the device in the appropriate disposal areas for recycling.

## 15. TECHNICAL FEATURES

| Codes             | Max user's weight | Adjustable height every 2,5 cm | Tips/castors         | Base*                                                                               | Base**                                                                               |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RP731<br>(childs) | 60 kg             | From 53 to 62,5 cm             | 4 tips               |  | -                                                                                    |
| RP736<br>(childs) | 60 kg             | From 41 to 60 cm               | 2 tips and 2 castors |  | -                                                                                    |
| RP729S            | 110 kg            | From 65 to 75 cm               | 4 tips               |  |  |
| RP729M            |                   | From 76 to 86 cm               |                      |  |  |
| RP729L            |                   | From 86 to 96 cm               |                      |  |  |

| Codes  | Max user's weight | Adjustable height every 2,5 cm | Tips/castors         | Base*                                                                               | Base**                                                                              |
|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RP730S | 130 kg            | From 68 to 78 cm               | 4 tips               |    |    |
| RP730M |                   | From 77 to 87 cm               |                      |    |    |
| RP730L |                   | From 83 to 101 cm              |                      |    |    |
| RP749M | 130 kg            | From 77,5 to 87,5 cm           | 4 tips               |    |    |
| RP749L |                   | From 83,5 to 101,5 cm          |                      |    |    |
| RP747  | 130 kg            | From 71 to 89 cm               | 4 tips               |    |    |
| RP735S | 130 kg            | From 68,5 to 78,5 cm           | 2 tips and 2 castors |    |    |
| RP735M | 130 kg            | From 76 to 86 cm               | 2 tips and 2 castors |   |   |
| RP735L | 130 kg            | From 83 to 101 cm              | 2 tips and 2 castors |  |  |
| RP745  | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 2 tips and 2 castors |  |  |
| RP737  | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 2 tips and 2 castors |  |  |

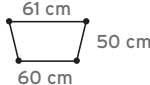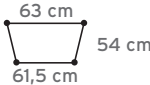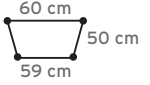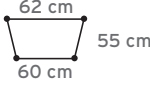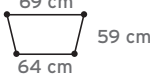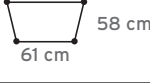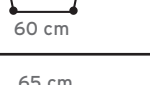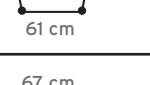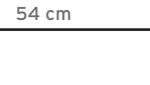
| Codes  | Max user's weight | Adjustable height every 2,5 cm | Tips/castors                    | Base*                                                                               | Base**                                                                               |
|--------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RP734  | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 2 tips and 2 castors            |    |    |
| RP744  | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 2 tips and 2 castors            |    |    |
| RP738  | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 4 castors                       |    |    |
| RP733S | 130 kg            | From 70 to 80 cm               | 4 castors                       |    |    |
| RP733M | 130 kg            | From 78 to 88 cm               | 4 castors                       |    |    |
| RP733L | 130 kg            | From 84 to 102 cm              | 4 castors                       |    |    |
| RP741  | 100 kg            | From 86 to 96 cm               | 4 castors<br>2 with brake       |  |  |
| RP743  | 120 kg            | From 85 to 103 cm              | 4 castors<br>2 with glide brake |  |  |
| RP742  | 130 kg            | From 86 to 103 cm              | 4 castors with brake            |  |  |
| RP748  | 130 kg            | From 77 to 92 cm               | 4 castors with brake            |  |  |

\*Dimensions measured at the lower height adjustment.

\*\*Dimensions measured at the higher height adjustment.

The measures may change  $\pm 1$  cm

## 15.1 Spare parts and accessories
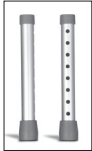
|                                                                                   |                                                                      |                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RV7052</b><br>Glide brake feet piece with attachments - pair      |  | <b>RV7053</b><br>Glide brake wheels pair               |  | <b>RV7053G</b><br>Glide brake twin castors Ø 10cm - pair          |  | <b>RV7054-5</b><br><b>RV7054-8</b><br>Swivel castors for walker pair 5 or 8 holes - pair |  | <b>RV7055-5</b><br><b>RV7055-8</b><br>Fixed castors 5 or 8 holes - pair |
|  | <b>RV7056-5</b><br><b>RV7056-8</b><br>Spare legs 5 or 8 holes - pair |  | <b>RV7051S</b><br>Swivel castors 8 cm - 5 holes - pair |  | <b>RV7051F</b><br>Swivel castors with brake 8 cm - 5 holes - pair |  | <b>RV7121-8</b><br>Swivel castors 8 holes Ø 10cm - pair                                  |  | <b>RV7154-8</b><br>Swivel castors 8 holes Ø 12 cm - pair                |
|  | <b>RV7155-8</b><br>Fixed castors Ø 12cm - 8 holes - pair             |  | <b>RV7015</b><br>Swivel castors Ø 8 cm - pair          |  | <b>RV7016</b><br>Swivel castors with brake Ø 8 cm - pair          |  | <b>RV7035</b><br>Rubber tips for RP729 pair                                              |  | <b>RV7030</b><br>Ø28mm Grey rubber tips pair                            |
|  | <b>RV7031</b><br>Ø28mm Black rubber tips pair                        |  | <b>RV7045</b><br>Basket for tow point foldable walkers |  | <b>RV7046</b><br>Basket for one point foldable walkers            |  | <b>RV7114</b><br>Anti-brachium support - pair                                            |                                                                                   |                                                                         |
|  | <b>RP758</b><br>Seat for RP748                                       |                                                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                         |

## 16. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual. Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

## 17. REPAIR

### 17.1 Warranty repair

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty

### 17.2 Repair not covered by warranty

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

### 17.3 Non-defective device

The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer .

## 18. SPARE PARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the receiving date.

## 19. EXEMPT CLAUSES

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.



## WARRANTY CERTIFICATE

**Product** \_\_\_\_\_

**Purchased on (date)** \_\_\_\_\_

**Retailer** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_

**Sold to** \_\_\_\_\_

**Address** \_\_\_\_\_ **Town/city** \_\_\_\_\_



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MADE IN P.R.C**

**MORETTI S.p.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)