

GARANZIA

Il deambulatore è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il deambulatore munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This walker has **2-year warranty** from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your walker repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the walker to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

• **RV7030** Puntale colore grigio-paio

ACCESSORI

• **RV7052** Gambe autobloccanti-paio
• **RV7053** Ruote autobloccanti-paio
• **RV7054** Ruote piroettanti-paio
• **RV7055** Ruote fisse-paio
• **RV7056** Gambe complete-paio

SPARE PARTS

• **RV7030** Grey rubber tip-pairs

ACCESSORIES

• **RV7052** Glide brake feet piece-pairs
• **RV7053** Glide brake wheels-pairs
• **RV7054** Swivel casters-pairs
• **RV7055** Spare casters-pairs
• **RV7056** Spare legs-pairs



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.



RP733
• Argento
• Silver



RP734
• Argento
• Silver



RP735
• Argento
• Silver



MOPEDIA

RP733



A 905078996

RP734



A 904577323



• Ruote piroettanti
• Swivel casters

RP735



A 900348576



• Ruote fisse
• Fixed casters

DEAMBULATORI MANUALE D'ISTRUZIONI

WALKERS INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP734-735

Grazie per aver acquistato il deambulatore della linea **MOPEDIA** by Moretti, realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in alluminio anodizzato leggero, pieghevole con manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo e ruote. Regolabile in altezza ogni 2,5 cm:


- **RP734/RP733** da 87 a 106 cm
- **RP735** da 82 a 106 cm

Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo per regolare l'altezza sfilando la canna e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna. Controllare che tutte le quattro gambe siano alla stessa altezza. Peso massimo sopportabile 130 kg.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE

Evitare contatti prolungati con acqua e controllare periodicamente la robustezza del deambulatore. Per evitare eventuali rischi si raccomanda di tenere il deambulatore lontano dalla portata dei bambini e di sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati.

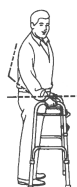

Con il braccio steso, l'impugnatura del deambulatore deve essere all'altezza del polso. Con la mano appoggiata sull'impugnatura, il gomito deve essere piegato di 20°-30°.

ATTENZIONE: Alla presenza di fili elettrici a terra, pavimento bagnato, tappeti, giocattoli o altri ostacoli, mobili, scalini e pavimenti sconnessi.



Non usare il deambulatore per salire o scendere le scale o sulle scale mobili.

1. Per trasferire il paziente dalla carrozzina al deambulatore assicurarsi che le ruote della carrozzina siano bloccate.



2. Per camminare con il deambulatore, alzarlo e posarlo comodamente davanti a se stessi assicurandosi che tutte e quattro le gambe siano appoggiate bene a terra. Camminare con prudenza facendo un passo alla volta.



I Class Medical Device
according to ECC directive 93/42

Code RP734-735

Thank you for purchasing walker, **MOPEDIA** by Moretti manufactured to support people with movement difficulty. It is realised in lightweight anodized aluminium tubing with padded handles non-slip rubber tips casters. It is foldable and height-adjustable every 2,5 cm:


- **RP734/RP733** from 87 to 106 cm
- **RP735** from 82 to 106 cm

To adjust the height:

Push the button to adjust the height. Draw out the stick paying attention to the corresponding holes up to the desired height which should reflect user's needs. Then leave the push button to fix the stick again. Repeat described procedure for each leg, at the end, check that all four legs have the same height. Maximum endurable weight 130 kg.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES

Avoid to leave the walker in contact with water for long periods and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tips every time they are worn out.

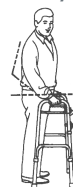

With your arm extended down, handgrips should be at your wrist height. With your hand placed on the handgrip, your elbow should be flexed by 20° - 30°.

ATTENTION: Beware of electrical cords in way, wet surfaces, rugs, toys or debris, furniture, little steps and gaps in floors. Do not use the walker on stairs or escalators.



1. To transfer the patient from the wheelchair to the walker, be sure wheels of the wheelchair are locked.



2. To walk with the walker, lift it up and place it comfortably in front of you, making sure legs end up on the floor. Walk carefully forward, one step at a time.

