



Caratteristiche Principali

- Sistema unico a valvola singola
- Maniglia integrata nel pallone per permettere un ottimo comfort
- Superficie rugosa (Safe- Grip) per una facile presa
- Veloce tempo di ritrazione per una rapida ventilazione
- MediPort su tutti i modelli, permette di somministrare farmaci senza disconnettere lo SPUR II dal tubo endotracheale

Ambu® SPUR® II Pallone Rianimatore Monopaziente

AMBU SPUR II fornisce agli utilizzatori un'eccezionale risposta visiva e tattile durante la ventilazione. Il pallone è molto sensibile a reagire, con una resistenza meccanica veramente minima. Inoltre il particolare design fornisce un ottimo volume di somministrazione con una ritrazione perfetta. AMBU SPUR II rappresenta una famiglia completa di palloni per la ventilazione, includendo le misure infante/neonatale, pediatrica e adulta. Tutti i palloni SPUR II arrivano in confezione singola, in un sacchetto da trasporto di plastica risigillabile, completo di una maschera o più maschere, e qualsiasi particolare accessorio. Inoltre le borse sono predisposte a "codice-colore" per permettere una facile identificazione delle misure infante/neonatale, pediatrica e adulta.

SPECIFICHE PALLONE

ADULTO - PESO >30 KG


Volume somministrato:	una mano	800 ml
	due mani	1100 ml
Volume pallone		1475 ml
Dimensioni (lunghezza x diametro)		295 x 127 mm
Peso, inclusa la reservoir e maschera		314 g
Limite valvola di sovrappressione*		4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Spazio morto		<6 ml
Resistenza inspiratoria senza O ₂		Max. 0.50 kPa (5.0 cm H ₂ O) at 50 l/min
Resistenza espiratoria		Max. 0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) at 50 l/min
* Nella versione adulta è disponibile senza valvola di sovrappressione		
Volume reservoir chiusa del pallone		2600 ml
Connessione paziente:		
	all'esterno	22 mm maschio (ANSI/ISO)
	all'interno	15 mm femmina (ANSI/ISO)
Connessione espiratoria (per attacco valvola PEEP)		30 mm maschio (ISO)
Perdita lato anteriore e posteriore		Non misurabile
MediPort:		Standard Luer LS 6
Temperatura di esercizio raccomandata		-18°C a +50°C
Immagazzinaggio		testato a -40°C a +60°C secondo EN ISO 10651-4:2002 e ASTM F 920-93

SPECIFICHE PALLONE

PEDIATRICO-PESO 10-30 KIG

Volume somministrato	450 ml
Volume pallone	635 ml
Dimensioni (lunghezza x diametro)	234 x 99 mm
Peso, inclusa la reservoir e maschera	215 g
Pressure limiting valve:	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Spazio morto	<6 ml
Resistenza inspiratoria senza O ₂	
Max. 0.50 kPa (5.0 cm H ₂ O) at 50 l/min	
Resistenza espiratoria	
Max. 0.3 kPa (3.0 cm H ₂ O) at 50 l/min	

Volume reservoir chiusa del pallone	2600 ml
Connessione paziente:	
Outside:	22 mm maschio (ANSI/ISO)
Inside:	15 mm femmina (ANSI/ISO)
Connessione espiratoria (per attacco valvola PEEP)	
	30 mm maschio (ISO)
Perdita lato anteriore e posteriore	Non misurabile
MediPort:	Standard Luer LS 6
Temperatura di esercizio raccomandata	-18°C a +50°C
Immagazzinaggio	testato a -40°C a +60°C secondo EN ISO 10651-4:2002 e ASTM F 920-93

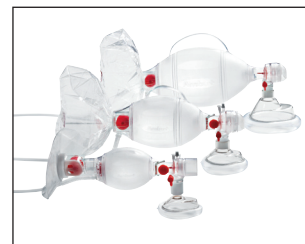

SPUR II con reservoir chiusa

SPECIFICHE PALLONE

INFANTE/NEONATALE <10 KG

Volume somministrato	150 ml
Volume pallone	220 ml
Dimensioni (lunghezza x diametro)	168 x 71 mm
Peso, inclusa la reservoir e maschera	140 g
Limite valvola di sovrappressione	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Spazio morto	<6 ml
Resistenza inspiratoria senza O ₂	
Max. 0.10 kPa (1.0 cm H ₂ O) at 5 l/min	
Resistenza espiratoria	
Max. 0.1 kPa (1.0 cm H ₂ O) at 5 l/min	
Volume reservoir chiusa del pallone	300 ml

Reservoir tubo:	Lunghezza	245 mm
	Diametro	22 mm
	Volume	100 ml
Connessione paziente:		
all'esterno	22 mm maschio (ANSI/ISO)	
all'interno	15 mm femmina (ANSI/ISO)	
Connessione espiratoria (per attacco valvola PEEP)		
	30 mm maschio (ISO)	
Perdita lato anteriore e posteriore	Non misurabile	
MediPort:	Standard Luer LS 6	
Temperatura di esercizio raccomandata	-18°C a +50°C	
Immagazzinaggio	testato a -40°C a +60°C secondo EN ISO 10651-4:2002 e ASTM F 920-93	



SPUR II neonatale con reservoir aperta a tubo

PARTE

MATERIALE

Pallone	SEBS
Alloggiamento della valvola paziente	Stirene butadiene
Anello blocco alloggiamento della valvola paziente	Policarbonato
Connettore espirato	Stirene butadiene
Protezione della spruzzata	SEBS
Turbino	20% di vetro con polipropilene
Mediport	Stirene butadiene
Inserto Mediport	Stirene butadiene
Protezione Mediport	Santoprene

Protezione port/adattatore tubo	Polietilene
Disco valvola	Silicone
Valvola d'immissione completa	Stirene butadiene
Colla della valvola d'immissione completa adesivo	UV modificato dell'acrilato dell'uretano
Reservoir O ₂	- pallone Polietilene
	- tubo* Polietilene
Tubo O ₂	PVC
Valvola di limitazione della pressione	ABS
Molla di limitazione della pressione	Acciaio inossidabile
* Solo nella versione infante/neonatale	

CAT. NO. CODICI ORDINE

325 001 000	Ambu SPUR II, adulto con O ₂ Reservoir
325 002 000	Ambu SPUR II, adulto con maschera n. 5 e O ₂ Reservoir
325 012 000	Ambu SPUR II, adulto con maschera n. 5, valvola di sovrappressione e O ₂ Reservoir
330 001 000	Ambu SPUR II pediatrico con O ₂ Reservoir
330 002 000	Ambu SPUR II pediatrico con O ₂ Reservoir e maschera n. 00 neonatale
330 003 000	Ambu SPUR II pediatrico con O ₂ Reservoir e maschera n. 0 infante
330 004 000	Ambu SPUR II pediatrico con O ₂ Reservoir e maschera bambino n. 1
330 005 000	Ambu SPUR II pediatrico con O ₂ Reservoir e maschera infante n. 0 e bambino n. 1
335 001 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir aperta/tubo
335 002 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir aperta/tubo, maschera neonatale n. 00
335 003 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir aperta/tubo, maschera infante n. 0
335 101 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir chiusa
335 102 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir chiusa, maschera neonatale n. 00
335 103 000	Ambu SPUR II infante con O ₂ Reservoir chiusa, maschera infante n. 0

Filiale

Ambu S.R.L.

Via Paracelso, 18
Centro Direzionale Colleoni
20041 Agrate Brianza - Milano
Italia
Tel.: +39 039 657811
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Produttore

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup
www.ambu.com