



# MT10 Timpanometro Palmare

Il timpanometro automatico MT10 è veloce e facile da usare e produce misurazioni oggettive che non possono essere ottenute con il solo otoscopio.



**Interacoustics**

# Screening rapido con MT10

In studi moderni e vitali è indispensabile eseguire test veloci e affidabili. MT10 è costruito per rispondere a queste esigenze in modo efficace, facile e conveniente.

## Timpanogrammi facili e veloci


I risultati possono essere ottenuti facilmente e velocemente senza bisogno di risposta dal paziente. Questo è un grande vantaggio in caso di pazienti difficili da gestire o bambini piccoli. Per esempio l'otite media, la maggiore causa di danneggiamento uditivo temporaneo o permanente nei bambini, può essere facilmente e velocemente individuata con MT10.

## Uso specialistico


MT10 è anche adatto all'uso diagnostico in quanto timpanogrammi e riflessi sono registrati con grande dettaglio. Con il nuovo MT10 si può individuare l'otite media, la perforazione di un timpano, il colesteatoma e chiari disordini neurologici. E' possibile anche controllare i tubi timpanostomici e verificare i risultati successivi ai trattamenti medici.

## Facile da trasportare

- Leggero
- Palmare
- Caricamento dati per la stampa
- Borsa per il trasporto opzionale, disponibili stampante termica e adattatore USB ad infrarossi per l'integrazione con il PC

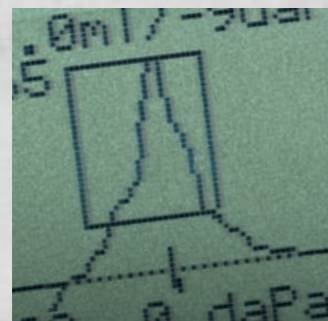

Un orecchio medio in salute produrrà un timpanogramma facilmente riconoscibile per la sua forma. Il picco sarà all'interno del riquadro di pass/refer.

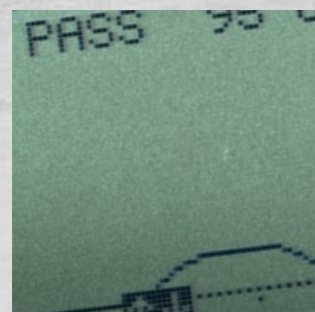

Il test del riflesso (opzionale) può essere effettuato per supportare e migliorare le diagnosi. Il risultato di pass/refer è determinato facilmente.



## Riflessi Acustici Ipsilaterali

Possono essere eseguiti quattro differenti test del riflesso per orecchio usando ciascuno una selezione di intensità fissa o automatica. Il test è effettuato al corretto livello di pressione e le reali caratteristiche del riflesso sono visualizzate sullo schermo per essere lette e interpretate dall'operatore.


- 4 frequenze (500, 1000, 2000, 4000 Hz)
- Ricerca singola o multipla della soglia come livello in dB
- Ricerca automatica della soglia

## 30 Pazienti in memoria

MT10 può memorizzare risultati di test fino a 30 pazienti. Questo permette di esaminare un largo gruppo di pazienti e di stamparne i relativi dati successivamente.



L'otite media può essere facilmente e velocemente individuata con MT10.

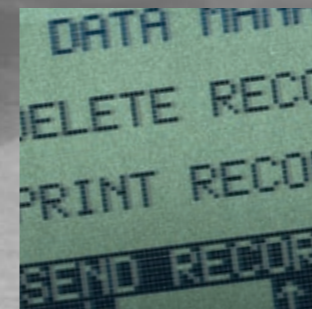

E' facile cancellare, stampare o trasferire dati al PC (è necessario l'adattatore USB opzionale per trasferire o stampare i dati).

## Integrazione con il PC


MT10 ha la possibilità di integrarsi con il PC usando il software Diagnostic Suite Windows® per trasferire i dati timpanometrici al PC.

Il software Diagnostic Suite offre le seguenti funzionalità:


- Trasferimento dei dati timpanometrici
- Layout di stampa avanzati
- Report personalizzati e multipli
- Pagina avanzata di report
- Gestione dei pazienti e delle sessioni di misurazione
- Piena integrazione con i database OtoAccess e Noah

## Caratteristiche MT10


- da -400 a +200 daPa
- Riflessi Ipsilaterali (opzionale)
- Fino a 30 pazienti in memoria
- Veloce e affidabile

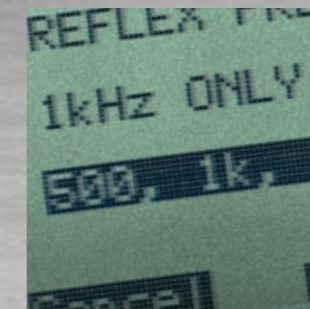

MT10 dispone di 4 frequenze per il riflesso

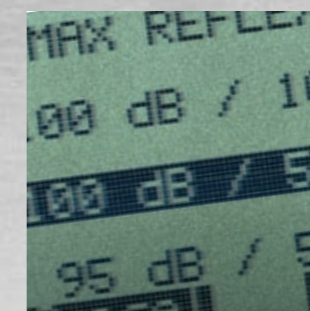

4 livelli di riflesso sono disponibili nel test del riflesso opzionale (85-100dB)

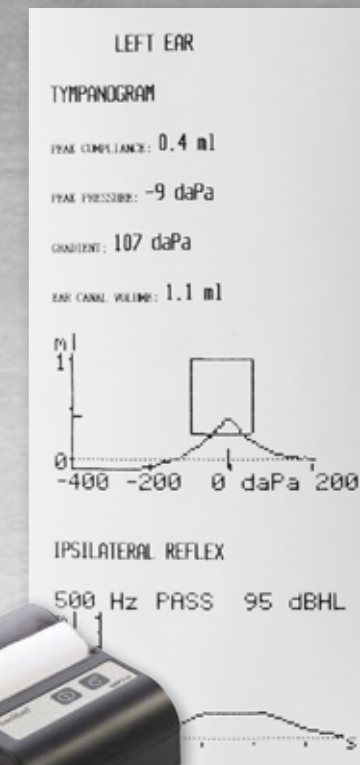

Esempio di stampa dalla stampante termica opzionale



Borsa per il trasporto opzionale



## Interacoustics

Interacoustics è leader mondiale per la fornitura di soluzioni diagnostiche in ambito audiologico e vestibolare. Aiutiamo la ricerca audiologica specialistica a raggiungere sempre nuovi traguardi, attraverso uno sviluppo continuo e una costante attenzione all'integrazione e alla valorizzazione delle esigenze del cliente.

---

## Sempre insieme a te

Se acquisti un'apparecchiatura audiologica a marca Interacoustics, non hai solo la garanzia di avere acquistato un prodotto di qualità, ma sei anche costantemente supportato da personale tecnico specializzato. Operiamo in più di 100 paesi nel mondo attraverso una selezionata rete di distributori e centri di assistenza che ti garantiscono pieno supporto e assistenza.

---

## Caratteristiche del prodotto

Tutte le caratteristiche tecniche e di hardware che riguardano MT10 possono essere scaricate dal sito web.

**Di più all'indirizzo**  
**[interacoustics.com](http://interacoustics.com)**

---

### Interacoustics a/s

Drejervaenget 8  
DK-5610 Assens

T +45 6371 3555  
F +45 6371 3522

[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)

[interacoustics.com](http://interacoustics.com)

Vai online per  
conoscere  
l'intera gamma  
dei nostri  
prodotti



**Interacoustics**